





NEW

簡易嫌気チャンバー グローブボックス VG-600N-O2

無酸素、低酸素下の
嫌気性微生物、
細胞などの
培養研究補助に

特注ご依頼多数につき製品化！

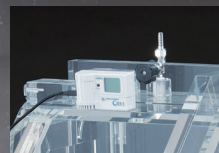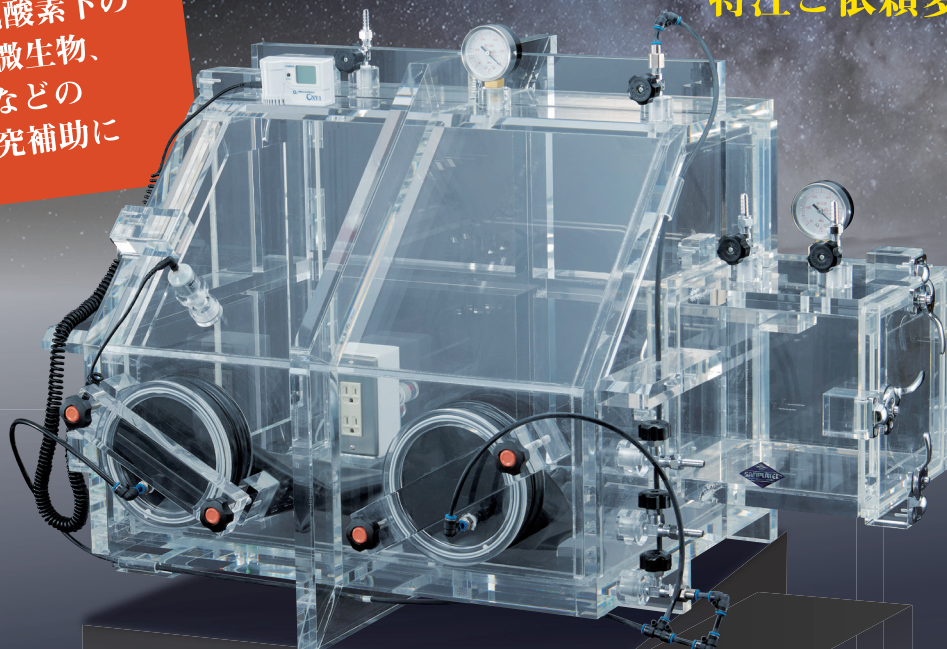

酸素濃度計



センサーポートカバー




内部電源

こんな特長あります！

- ★簡易型嫌気チャンバーとして導入し易い、価格を抑えた仕様
- ★600×600×450Hの作業スペース
- ★ガスバリア製の高いブチルゴム手袋を標準装備
- ★気密性の高い実績ある真空型グローブボックス
- ★全面アクリル製で透明性が高く、チャンバー内操作が容易
- ★ガス置換により内部の酸素濃度を極限まで低下(0.1～25% RH)
(別装置接続で約10ppm以下まで実現可能)
- ★作業性の高い電動昇降作業台の提案も可能です。

LC4P®

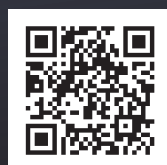

WEB ページはこちら

商品コード

商品名

呼称

定価

30340

嫌気グローブボックス(嫌気チャンバー)

VG-600N-O2

¥1,080,000

※別途大型送料5%要 ※付属品:ブチルグローブ1双、グローブバンド2個、内部コンセント2連式、酸素濃度計(センサーケーブル付)OXY-1S 1台、
グローブポートカバー2個、センサーポート用キャップ1個

■グローブボックス仕様

外寸法 (mm)		983W×675D×655H
本体有効内寸法 (mm)		600W×240D(上辺)/450D(下辺)×450H
バスボックス内寸法 (mm)		250W×200D×200H
バルブ	本体	2 個
	バスボックス	2 個
	グローブポート	1 個
	ポンプ接続側	2 個
真空ゲージ		本体・バスボックス各 1 個 (0 ～ 0.1MPa 用)
ブチルグローブ・グローブバンド		1 組
グローブポートカバー		1 組 (減圧時使用)
重量		約 80kg

■酸素濃度計仕様

型式	OXY-1S
検知原理	ガルバニ電池式
測定レンジ	0.0～25.0%
分解能	0.10%
測定精度	±0.5%(0.0～25.0%)
使用温度	0～40℃
使用湿度	0～95%RH (結露なきこと)
電源	単 4 アルカリ電池 2 本
電池寿命	約 1 年 (無警報時)
寸法	55H×88W×35.5Dmm
質量	本体: 約 88g、センサーケーブル: 約 150g

※表示価格は全て税抜きとなります。

※価格、仕様については 2023 年 11 月現在のものです最新の情報についてはお問い合わせください。

※記載の商品は全て研究用であり、人体への使用や治療を目的とする用途には使用できません。



株式会社 サンプラテック

- 本 社
- 東京支店
- 名古屋支店
- シリコンバレーオフィス(USA)

TEL: 06-6353-5141

TEL: 03-5688-5141

TEL: 052-962-0291

TEL: +1-408-830-7178

FAX: 06-6353-5975

FAX: 03-5688-5142

FAX: 052-962-0293

LC4P®

Laboratory Create
for Professor, Professional, Pioneer, Product